

KF80 미세먼지마스크, **KF94** 미세먼지마스크



첫번째

대한민국 식품의약품안전처에서
의약외품 보건용마스크 제조업허가와
의약외품 KF80 및 KF94 보건용마스크 품목허가를 받은
대한민국 정부가 인증한 미세먼지마스크입니다.

식품의약품안전처 의약외품 허가 제품



식품의약품안전처

두번째

자재비용을 아끼지 않았습니다.
비교적 저렴한 둥근 모양의 귀끈을 사용하지 않고
평편한 스타일의 스판덱스를 채용하여
장시간 착용해도 귀가 아프지 않습니다.

당사 마스크는 크게 세개의 면으로 구성되어 있습니다.

세번째

이 세개의 면 중 입이 닿을 수 있는 가운데 면에는
형태를 유지하여 입과 미세먼지마스크와의 사이에
공간이 유지될 수 있도록 써멀본드60GSM 부직포를 채용한
4중 구조로 보다 안락한 착용감을 드립니다.



네번째

윗면과 아랫면은 3중 구조로
부드럽게 얼굴과의 밀착성을 향상시켜
외부 공기가 직접 호흡되지 않도록하여
보다 깨끗한 착용감을 드립니다.

다섯번째

미세먼지마스크 앞면을 도트(점) 융착 처리하여
4중 구조 필터의 층간 분리를 방지해줌으로
안감이 입에 접촉하지 않아
보다 쾌적한 착용감을 드립니다.
의장등록특허 제30-1007778호



여섯번째

아기 기저귀 안감을 내피로 채용하여 보다 부드러운 착용감을 드립니다.

일곱번째


귀끈을 미세먼지마스크의 외피 쪽으로 봉제하여

얼굴에 봉제부의 이물감을 주지 않으며,

귀끈이 바깥쪽에서 마스크의 끝부분을 감싸 눌러주어

밀폐력이 향상되고, 이로 인해 보다

안락한 착용감을 드립니다.

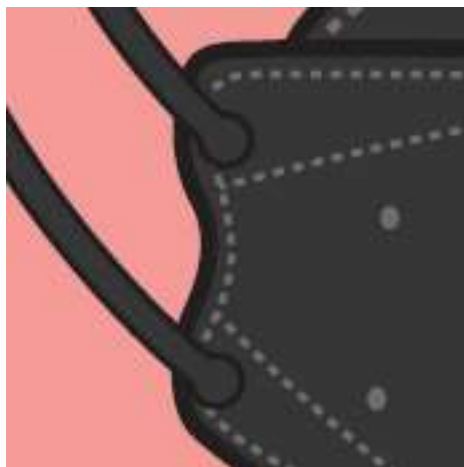

여덟번째

코등 부분에 코 형태 고정용 철심을 채용하여
얼굴과의 밀착성을 향상시켜주고,
아울러 안경 착용자의 경우 안경 김서림 방지에 효과가 있습니다.



아홉번째

전 제품에 날개 개별 포장을 적용하여 출하함으로써
장기 보관에 보다 위생적이며
미세먼지마스크의 품질을 보존합니다.

열번째

화려하진 않지만 튼튼한 박스를 채용하여
택배용 박스가 별도로 필요하지 않도록
포장재 사용을 최소화하여 친환경경영에 동참하고 있습니다.

열한번째

대부분의 공정을 자동화하여
완벽한 제품만을 소비자 여러분께
공급하고 있습니다.

식품의약품안전처 인증 KF80 KF94 보건용마스크에 대한 상식

KF80 및 KF94는
KC마크보다 상위 개념으로
보건용마스크에 대한 등급 허가 제도로써
대한민국 식품의약품안전처에서
제품에 사용되는 자재는 물론 제조 시설까지
엄격한 시험과 심사를 거쳐
검증된 제품과 업체에게만 보건용마스크 제조, 품목 허가를 내주기 때문에
안심하고 사용할 수 있는 보건용마스크임을 표시하는 것입니다.

대한민국 식품의약품안전처에서 규정한
KF80 보건용마스크의 효능/효과 표준은
황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질로부터 호흡기 보호
그리고
KF94 보건용방역마스크의 효능/효과 표준은
황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 및 감염원으로부터 호흡기 보호입니다.

KF80 및 KF94 품목허가를 득하지 않은 마스크는

‘미세먼지 마스크’ 혹은 ‘항사 마스크’라는

문구를 사용하여 광고하고 판매할 수 없도록

관련법으로 규정하고 있습니다.

한편으로,

일부 어린이용 마스크라고 하며

‘미세먼지 마스크’, ‘항사마스크’라고 광고하는 제품이 시중이 있지만,

이 또한 일부 부적절한 표현인 것입니다.

단,

아이의 얼굴이 커서

소형 보건용마스크(KF80 또는 KF94)가 얼굴에 맞으면 좋겠습니다만,

아이 얼굴이 작아

소형 보건용마스크도 얼굴에 비해 크면

사용하는 것이 별 도움이 되지 못합니다.

이런 경우, 미세먼지 경보 발령시에는

아이의 야외 활동을 최소화하는 것만이 최선입니다.

식약처 KF80 및 KF94 시험 항목 중,

얼굴과 마스크 사이, 틈의 밀폐율을 측정하는 ‘누설률’이라는 측정 항목이 있는데,

이 항목은 실제 인체 시험으로 하게끔 규정되어 있고,

어린이를 대상으로 인체 시험을 할 수 없기 때문에

영유아 혹은 유치원 내지 초등학교 저학년 어린이 얼굴에

맞는 크기의 제품을 생산할 수는 있으나,

시험을 할 수 없기 때문에

KF80 및 KF94 의약외품 품목허가증을

교부할 수도, 발급 받을 수도 없습니다.

해서,

시중에 나와있는 KF80 및 KF94 보건용마스크 중에서

소형 마스크가 아이 얼굴에 맞는지 확인해보고

구매하는 것이 바람직하다고 볼 수 있습니다.

한편으로는

상기와 같은 이유로 KF80 및 KF94 인증은 없지만

믿을 만한 회사의 제품으로

동일 자재를 사용한 것을 확인할 수 있다는 전제하에

영유아 및 얼굴이 작은 어린이에게 맞는 크기로 제조된 마스크라면

사용해도 좋을 것입니다.

결론적으로

KF80 및 KF94 보건용마스크 미세먼지마스크 황사마스크는

착용자 얼굴 크기에 맞는 크기의 제품을 선택하여

사용하는 것이 바람직합니다.